


NIPLUX

WAISTUPLUS

取扱説明書

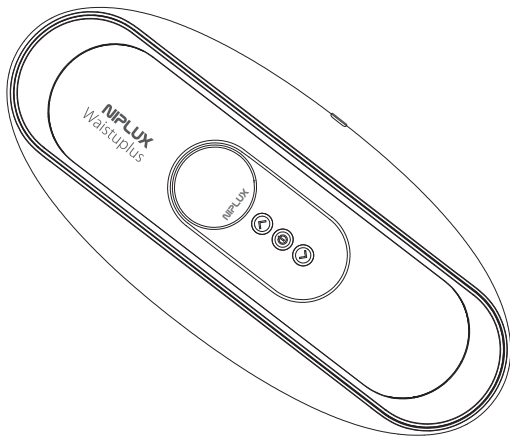

保管用

保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

www.niplux.jp



公式サイト



操作方法動画

目次



安全上のご注意	03
セット内容と各部の名称	09
充電方法	11
ボタン電池交換方法	12
使用方法	13
モード別オシログラム	17
お手入れ・保管方法	18
商品仕様	19
故障かなと思ったら	20
無償保証規定	23
保証書	24

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■危害・損害の程度を示す図記号

 危険	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

■お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。	 必ず守る	実行しなければならない内容。
---	--------------	---	----------------

危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器 ●心電計などの装着型医用電子機器

警告



禁止

次のような方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 悪性腫瘍のある方 ●心臓疾患のある方、血栓のある方 ●血行障害、毛細血管拡張、高血圧など血圧や血管に異常のある方 ●薬を服用中の方 ●妊娠中、生理中の方 ●出産後3カ月以内の方（出産後は、医師にご相談の上ご使用下さい） ●糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●肌に傷や湿疹、はれもののある方 ●体調が優れない方 ●発熱（38℃以上）している方 ●骨折や骨粗しょう症など、骨に異常のある方 ●脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、痛風、急性（疼痛性）疾患のある方 ●医療機関で治療中の方 ●骨折、整形などで背中、腹部、腰部に埋め込み手術を受けた方 ●背中、腹部、腰部に病気のある方、またはあった方、手術を受けた方 ●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方 ●神経障害、皮膚知覚障害のある方 ●熱さを自覚できない方 ●アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎のある方、敏感肌の方 ●機能的障害のある方 ●脳神経に異常を感じている方（てんかんなど） ●安静を必要とする方、四肢の不自由な方 ●刺青（タトゥー）を入れている部位に使用する方

警告

腰部のみに使用し、その他の部位(頭部、胸部、心臓周辺)には使用しない。

事故やケガの原因になります。

腰部に薬を塗布した方、湿布を貼っている方、または剥がした直後の方は使用しない。

ケガや肌トラブルの原因になります。

視覚障害のある方は1人で使用しない。

ケガや体調不良の原因になります。

他の低周波/高周波医療機器と同時に使用しない。

事故やケガの原因になります。

乳幼児や子供の手の届く場所に保管したり、使用させない。ペットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

例: 血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など

次のようなときは使用しない。



●疲労が激しい時 ●飲酒後 ●食前、食後の1時間 ●睡眠中 ●皮膚に異常のある時 ●運転中

事故やケガ、体調不良の原因になります。



禁止




警告

 必ず守る	<p>使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。 医師に相談のうえ指示に従ってください。</p>
	<p>本体、充電コードに次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し電源を切る。充電中の場合は充電コードを抜く。 破損や発火、事故やケガの原因になります。 ●異音 ●異臭 ●異常発熱 ●けむりが出るなど</p>
	<p>交流100V~240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。 ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。 火災や感電、故障の原因になります。</p>
	<p>充電コードは付属品または同じタイプ (type-c) のものを損傷がないか確認したうえで使用する。 故障や事故の原因になります。</p>
 禁止	<p>充電コードは ●先端部分を持ち、コードを引っ張らない。 ●濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させない。 ●収納時に本体などに巻きつけない。 ●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。 ●重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。 ●傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。</p> <p>感電やショート、発火の原因になります。</p>
	<p>充電コードや本体の差込口、隙間などに異物や水分を付着させない。 事故やケガ、故障の原因になります。</p>

警告

 禁止	<p>定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。 電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。</p>
	<p>高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で保管・使用しない。 加熱したり、火中に投下しない。 事故や部品の変形、故障の原因になります。</p>
	<p>不安定な場所で保管しない。本体や付属品に重いものを置いたり、落としたりぶつけたりしない。 ケガや本体が破損、故障する原因になります。</p>
	<p>本体および充電コードを水につけたり、浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。 火災や感電、ケガの原因になります。</p>
	<p>取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。 事故やケガ、故障の原因になります。</p>
 必ず守る	<p>使用しない時は必ず電源を切り、長時間の加熱を避ける。 本体や付属品に破損がないことを定期的を確認する。 事故や故障の原因になります。</p>
	<p>本製品を使用するときは、腹部および腰部から金属、アクセサリ類を外す。 事故やケガの原因になります。</p>
	<p>使用中に本体を取り外す場合は、必ず電源をオフにしてから外す。 通電中に本体を動かすと、ショックを受ける恐れがあります。</p>

警告


 <p>分解禁止</p>	<p>分解や修理、改造をしない。</p> <p>火災や感電、ケガや故障の原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。</p>
 <p>禁止</p>	<p>ドライヤーやファンヒーターなどで本体や付属品を乾燥させない。</p> <p>部品の変形、故障の原因になります。</p>
 <p>必ず守る</p>	<p>お手入れする際は必ず電源を切る。</p> <p>感電や故障の原因になります。</p>
	<p>初めて使用するときや慣れるまでは、必ずEMSレベル1、低温および短時間から使用する。</p> <p>事故やケガの原因となります。</p> <p>1回の使用時間は30分以内とし、連続使用は避ける。</p> <p>長時間の連続使用は必要以上の刺激となりケガの原因になります。</p>

セット内容と各部の名称


万が一、セット内容に不足がございましたら、カスタマーサービスまでご連絡下さい。

セット内容

- 本体(ウエスタプラス)..... 1台
- リモコン 1台
- USB充電コード (type-c) 1本
- 取扱説明書兼保証書 1部
- CR2032コイン型リチウム電池 2個

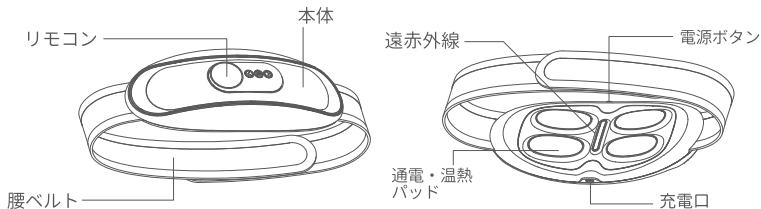

セット内容と各部の名称

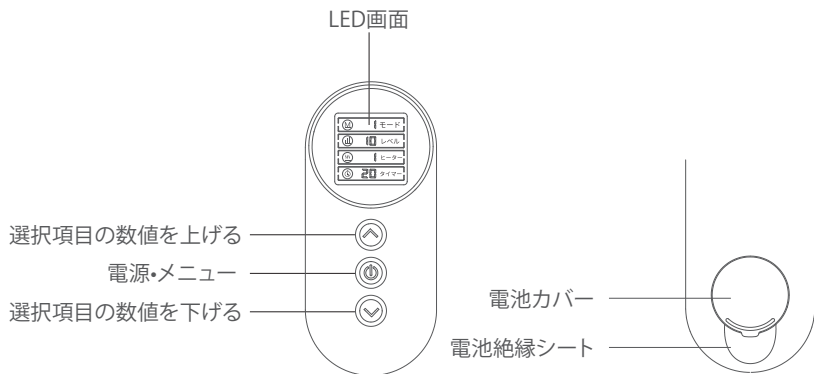

※付属のコイン型リチウム電池のうち1個は、出荷時にテスト用としてリモコンに挿入済みです。

※ご使用前に電池絶縁シートを引き抜いてください。

充電方法

1 | 初めてご使用になるときや、『ピー』と6回鳴ったときは本体の電源をオフにしてから、充電してください。

『ピー』が6回になると充電残量が少ない合図となり、その後電源が切れます。

充電コードを差し込むと『ピ』となり、抜くと『ピピ』となります。

充電中、遠赤外線LEDランプはゆっくり点滅し、充電が完了すると点灯します。


充電が満タンになるまで、2～3時間かかります。

※5V2A以下のACアダプターから充電してください。

(5V2Aを超えるACアダプターを使用すると故障の原因になります。)

2 | 満タン後、3～4日使用可能(毎日30分)です。動作時間は充電環境やご使用環境、ご使用時のレベルによって大きく異なります。


※長期間使用せず放置すると、充電電池の寿命が短くなるため、少なくとも月に1回の充電をお勧めします。

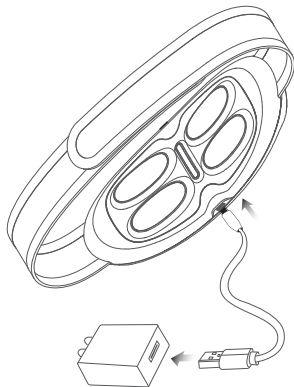

※ACアダプターは付属しておりません

ボタン電池交換方法

- 1 | リモコンはCR2032ボタン電池を使用しています。
- 2 | リモコンのLED画面が暗くなったり、本体の反応が弱くなったりしたときは、電池の残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してください。
- 3 | 長期間本体を使用しない場合、電池を取り出してください。液漏れが故障の原因になります。
- 4 | CR2032電池以外を使用しないでください。
- 5 | 電池はプラス極を上にし、マイナス極が下になるようにします。
- 6 | 45℃以上の環境で使用しないでください。電池の寿命や性能に支障をきたします。
- 7 | 使用済電池は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

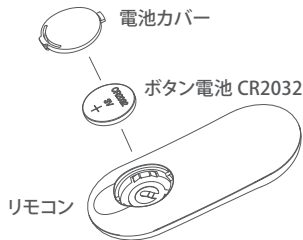


使用方法



EMSの感じ方は個人差があります。万が一、強い痛みを感じたり、気分が悪くなったりした場合は直ちに使用を中止してください。

腰ベルト
(面ファスナー)

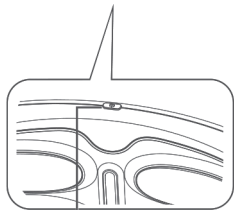

電源ボタン

1 | 腰に装着する

パッドがお肌にぴったりと密着するよう腰ベルトを巻き、面ファスナーで本体を固定してください。

※化粧水やジェルなどで腰まわりを保湿してから装着するとよりEMSを感じやすくなります。

※初めはパッドに保護フィルムが貼られているため、必ず剥がしてからご使用ください。


※腰ベルトは苦しくない程度にしっかりと固定してください。

2 | 本体上部の電源ボタンを長押ししてオンにする

※リモコンの電源を先に入れると、本体とリモコンが接続されない場合があります。

※充電コードを差したまま本体の電源を入れることはできません。

使用方法

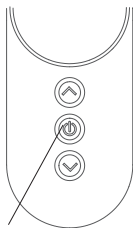

電源ボタン

3 | リモコンの電源ボタンを長押しする

デフォルト設定(モード:1、レベル:0、ヒーター:2、タイマー:15)で本体が動作し始めます。

※リモコン操作時に本体が信号を受信すると、『ピッ』となります。『ピッ』とならない場合は、再度操作するようにしてください。

※約10秒間操作が行われないと、リモコンは節電モードになり、画面が暗くなります。リモコン操作をするには、再度上下ボタンのいずれかを押ししてください。



4 | リモコンの操作ボタンでEMSモードを設定する

電源ボタンで【モード】を選択し、上下ボタンでモードを設定してください。モードは6種類から選択が可能です。

※デフォルトはモード1です。

※モードを切り替えるたびに、EMS強さレベルは1にリセットされます。

使用方法



5 | リモコンの操作ボタンでEMS強さレベルを設定する

電源ボタンで【レベル】を選択し、上下ボタンでレベルを設定してください。16段階から選択が可能です。

※デフォルトはレベル0(刺激なし)です。

※初めて使用する場合は弱めのレベルからお試しください。
慣れたら、お好みに合わせてレベルを選択してください。



6 | リモコンの操作ボタンで温熱モードを設定する

電源ボタンで【ヒーター】を選択し、上下ボタンで温度を設定してください。

※初めて使用する場合は低温からお試しください。

温熱モードの種類	温度
3：高温	42±1°C
2：中温（デフォルト）	40±1°C
1 低温	38±1°C
0：加熱なし	—

使用方法



モード



10 レベル



ヒーター



20 タイマー

7 | リモコンの操作ボタンで時間を設定する

電源ボタンで【タイマー】を選択し、上下ボタンで時間を設定してください。**5,10,15,20,25,30分**から選択が可能です。

※デフォルトは15分間です。

※タイマーは延長可能ですが合計で30分まで使用可能です。
例:20分設定し残り1分の場合、20分延長しても10分ほどでオフになる。

8 | 使用后、本体の電源をオフにして身体から取りはずす

※本体が動作している状態で、身体から取りはずさないでください。途中で使用を止める場合、必ずリモコンまたは本体の電源ボタンを押して、オフにしてから取りはずしてください。

モード別のオシログラム

•モード 1

<28Hz~100Hz>



1分ごとにモード3、4、5の波形を繰り返す

•モード 2

<30Hz~100Hz>



1分ごとにモード3、4、6の波形を繰り返す

•モード 3

<95Hz~100Hz>



•モード 4

<30Hz~100Hz>



•モード 5

<28Hz~100Hz>



•モード 6

<99Hz~100Hz>



お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- 本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後にかから拭きをしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

保管方法

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



商品仕様

ブランド	NIPLUX(ニップラックス)
品名	WAISTUPLUS(ウエスタプラス)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約8W(充電時)
本体寸法	約251×110×50mm
化粧箱寸法	約290×170×82mm
重量	本体:約300g
電池容量	1200mAh
リモコン電池	CR2032コイン型リチウム電池
使用環境	環境温度5℃-40℃/相対湿度≤80%RH
セット内容	本体×1/リモコン×1/USB充電コード×1/取扱説明書兼保証書×1/ ボタン電池×2(試用電池×1(セット済)/新品×1)
製品素材	本体:ABS樹脂、PC / リモコン:ABS樹脂 / 電極パッド:ステンレス
生産国	中国

※本製品は医療機器ではありません。※デザインおよび仕様については 予告なしに変更することがございます。

故障かなと思ったら

Q	A
モード、EMS、ヒーター、 タイマーの設定	本体の電源を入れ装着し、リモコンの電源を2秒ほど長押しして電源をオンにしてください。 リモコンの電源ボタンを短押しし、変更したい機能にカーソルを合わせて上下ボタンでレベルを設定してください。 再度、電源ボタンを短押しして各機能の設定ができます。
リモコンが反応しない	電池切れの可能性があります。リモコンの電池を交換してください。
『ピ』が6回なる	充電残量が少ない時の警告音です。充電してください。
延長したのにオフになる	延長は可能ですが動作開始から合計30分まで連続使用可能です。
充電中ピピピ...となり続ける	充電コードと本体の接触不良の可能性があります。 ACアダプター、コードを変えて再度充電をお試しください。

故障かなと思ったら

Q	A
充電ができない	出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。
	充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。 他のACアダプターや充電コードで充電をお試しください。
	充電口に付着物がないか確認してください。
	CtoCの充電コードでは充電できない場合があります。 必ず指定の充電コードをご使用ください。 また、一部のモバイルバッテリーは使用できない場合がありますので、 ACアダプターでの充電をお試しください。
6分で電源が切れる	パッドがお肌を検知できない場合、約6分で自動停止します。 直接素肌に装着してください。 ※お肌を検知できない場合、約1分後にランプが点滅をはじめ、その後 約5分後に自動停止します。
	装着後リモコンを操作してレベルなど設定してください。 デフォルトモードのまま操作がないと約6分で自動停止します。

故障かなと思ったら

Q	A
EMSを感じない、弱い	<p>お水やジェルでお肌を保湿し、素肌に直接装着してください。 ※オイルは通電しないため、使用しないでください。</p>
	<p>EMS強さレベルが設定できていない可能性があります。 デフォルト設定はレベル0のため、お好みのレベルに調整してください。 また、モードを切り替えるたびにEMS強さレベルは1にリセットされるため、再度レベルを設定してください。</p>